

ACTIVALL™

Cadru dinamic pentru stat în picioare



Manual de utilizare

ATENȚIE!

Producătorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a dispozitivului numai atunci când produsul a fost achiziționat de la angajatul calificat Akces-MED Ltd. sau de la magazinul medical specializat!

Akces-MED Ltd. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și comerciale în conținutul instrucțiunii fără avertisment.



Produsul marcat cu semnul CE este un dispozitiv medical din clasa I, conform regulii 1, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Compania Akces-MED Ltd. a introdus sistemul de management al calității ISO 13485 în ceea ce privește producția, vânzările și serviciile.



Cuprins

Introducere	4
1. Scopul manualului de utilizare	5
2. Indicații și contraindicații pentru utilizare	5
3. Caracteristică generală	7
4. Tabel de mărimi	8
5. Cum se assemblează produsul	9
6. Cum se utilizează produsul	11
6.1 Suport pentru piept	11
6.2 Sprijin pentru regiunea pelviană	12
6.3 Hamul pelvian	13
6.4 Roți cu frână de fricțiune	15
7. Învăță să mergi	15
8.1 Pregătirea utilizatorului	17
8.2 Pregătirea produsului	18
8.3 Poziția verticală	19
9. Norme de siguranță	20
10. Condiții de garanție	22
11. Întreținere și curățare	22
11. Întreținere și curățare	29
12. Etichetare	31

Introducere

În ceea ce privește acest cadru dinamic pentru stat în picioare, el este extrem de benefic în procesul de recuperare zilnică, care are loc nu doar în spitale și secții de reabilitare, ci și în locuința utilizatorului. Acest dispozitiv îi permite utilizatorului să stea în picioare și să meargă. În plus, copiii pot face primii pași, iar adulții își pot menține sau recăpăta forma fizică.

Cadrul, ușor și totodată stabil, ajută la deplasarea independentă în interiorul dispozitivului, necesitând doar o implicare minimă din partea utilizatorului. Reglarea corectă a suporturilor oferă siguranță și confort în timpul activităților.

ACTIVALL™ are un rol important, deoarece oferă utilizatorului posibilitatea de a dobândi experiențe noi și, mai ales, de a fi cât mai independent posibil.

Nu uitați să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Veți găsi nu numai informații utile, ci și orientări privind utilizarea sigură și eficientă a produsului.

Dacă aveți întrebări sau observații, nu ezitați să ne contactați:

Consultant în domeniul medical: mobil +48 516 183 883

Akces-MED Ltd.: ph. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare, care este esențial pentru utilizarea corectă și sigură a produsului.

Amintiți-vă că respectarea liniilor directoare este foarte importantă. Asigurați siguranța și prelungește durabilitatea, precum și estetica produsului.

1. Scopul manualului de utilizare

ATENȚIE!

Prezentul manual de utilizare conține informațiile de bază esențiale pentru: pregătirea înainte de utilizare, folosirea corectă, întreținerea, curățarea și condițiile de garanție.

Manualul de utilizare trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil. Acesta este destinat persoanelor care îngrijesc persoane cu dizabilități, precum și medicilor și fizioterapeuților care utilizează produsul.

Înainte de a utiliza cadrul dinamic ACTIVALL™, utilizatorul este obligat să se familiarizeze cu manualul de utilizare.

2. Indicații și contraindicații pentru utilizare

Cadrele dinamice de stat în picioare sunt destinate persoanelor cu afecțiuni ortopedice, neurologice și cardiologice, precum și persoanelor aflate în perioada postoperatorie, care nu pot adopta și menține poziția verticală pe cont propriu, ca urmare a unei imobilizări prelungite. Acest dispozitiv reprezintă un ajutor de neînlocuit în procesul de reabilitare, atât din punct de vedere funcțional și motric, cât și în ceea ce privește integrarea socială. Este un sprijin valoros în activitățile zilnice, nu doar în timpul exercițiilor de recuperare, ci și în timpul jocului sau al studiului. Alegerea dimensiunii potrivite a dispozitivului se face în funcție de indicațiile medicale și de parametrii anatomici, indiferent de vârsta utilizatorului.

Este recomandat pentru utilizatori în următoarele situații:

- paralizie cerebrală – diverse tipuri și forme;
- leziuni cerebrale și medulare însoțite de paralizie sau slăbiciune a membrelor inferioare, tulburări de echilibru și coordonare motorie de diferite etiologii;
- boli de demielinizare (ex.: scleroză multiplă – sm);
- meningocel;
- boli musculare cu slăbiciune și paralizie (ex.: distrofii musculare, miastenia gravis, miozită);
- afecțiuni genetice;
- boli degenerative și neurologice;
- alte afecțiuni asociate cu slăbiciunea musculară, paralizia sau tulburările aparatului locomotor;
- după traumatisme craniene, medulare și leziuni ale coloanei vertebrale, însoțite de paralizie sau pareză.

Contraindicații:

În timp ce stați în picioare, utilizatorul care se află într-o poziție în picioare ar trebui să fie monitorizat îndeaproape. Tratamentul trebuie întrerupt în cazul unor reacții adverse precum: paloare, transpirație sau leșin, tensiune articulară și deformările rezultate ale corpului. Procedura ulterioară trebuie consultată cu medicul specialist sau cu un fizioterapeut care a prescris tratamentul.

Starea critică a utilizatorului este o contraindicație absolută pentru a sta în picioare.

Contraindicații relative pentru picioare în poziție verticală sunt:

- hipertensiune arterială în repaus peste 200/110 mmHg, hipertensiune pulmonară, aritmii cardiace, astm instabil, tulburări metabolice instabile, boală moderată a valvei cardiace,
- orice afecțiune, cum ar fi o fractură de vindecare sau osteoporoză severă, care face imposibilă suportarea greutății corporale proprii a utilizatorului;
- fractură osoasă cu uniune incompletă, cu excepția cazului în care este aprobată de un medic;
- restricții postoperatorii privind încărcarea în comun;
- durere în timp ce stați în picioare în cadru (cauzată de subluxarea sau dislocarea articulației șoldului, suprasolicitarea țesuturilor moi sau presiunea excesivă). Subluxarea sau dislocarea articulației șoldului în absența durerii nu este o contraindicație.

Persoanele cu flexie semnificativă în articulațiile șoldului sau genunchiului, precum și cu contracturi în articulația gleznei, pot să nu poată utiliza cadrul în picioare. Asigurați-vă că poziția utilizatorului în cadrul în picioare nu provoacă presiune excesivă sau întinderea zonelor afectate ale corpului. În astfel de cazuri, statul în picioare poate fi contraindicat până când se obține o gamă mai mare de mișcare în articulațiile contractate.

În cazul persoanelor cu insuficiență cardiovasculară (hipertensiune arterială în repaus peste 200/110 mmHg, hipertensiune pulmonară, aritmii cardiace, boală moderată a valvei cardiace); sistemul respirator (astm instabil) și tulburări metabolice instabile, este necesar să se monitorizeze utilizatorul în timp ce stă în picioare pentru a preveni complicațiile grave.

3. Caracteristică generală

SUPORT TORACIC REGLABIL

SUPORT PELVIAN REGLABIL

HAM PELVIAN

MÂNER DE SPRIJIN

CADRU CU ROȚI PIVOTANTE
ECHIPAT CU FRÂNE

SEPARATOR AL MEMBRELOR
INFERIOARE*

ROȚI FRONTALE CU FRÂNE – 75
MM

ROȚI POSTERIOARE CU FRÂNE
PRIN FRECARĂ – 75 MM




Stabilizator al membrelor inferioare – transformă ACTIVALL™ într-o versiune complet funcțională, statică a cadrului dinamic pentru stat în picioare.

Separator al membrelor inferioare* – împiedică încrucișarea picioarelor în timpul utilizării funcției dinamice a dispozitivului.

INFORMAȚII!

Accesoriiile disponibile pot fi găsite pe site-ul **akces-med.com** în secțiunea de produse.

4. Tabel de mărimi

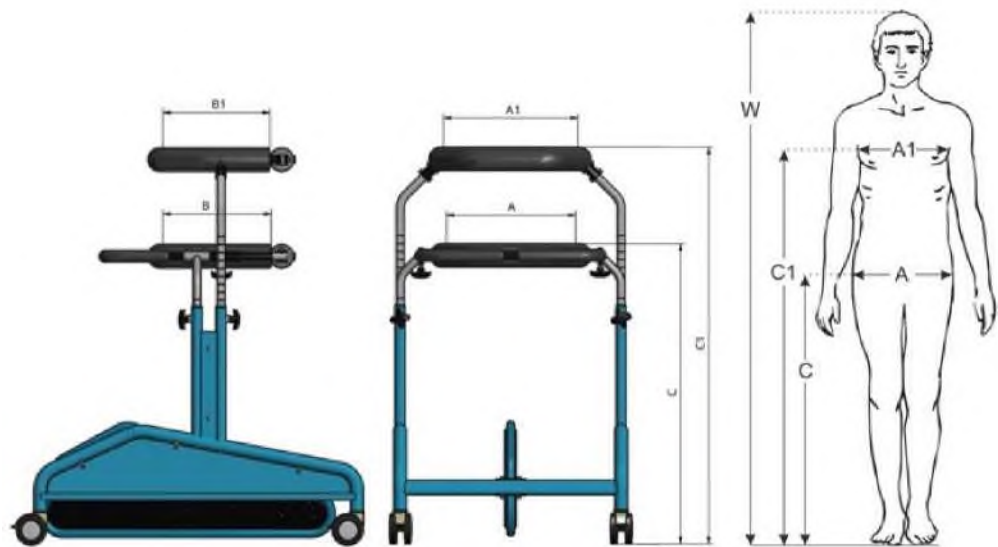

		Dimensiune					
Simbol	Măsurare	UM	1	2	3	4	5
W	înălțimea orientativă a utilizatorului *	[cm]	70 - 100	100 - 130	110 - 150	110 - 170	140 - 200
A / A1	lățimea suportului pelvian / toracic	[cm]	26	28	31	37	42
C	înălțimea suportului pelvian	[cm]	44 - 60	66 - 82	77 - 102	83 - 112	98 - 120
C1	înălțimea suportului toracic	[cm]	52 - 70	77 - 95	89 - 116	92 - 126	108 - 143
B / B1	adâncimea suportului pelvian / toracic *	[cm]	22	25	27	29	35
	perimetrul de sprijin pelvian / toracic	[cm]	87	97	106	124	144
	greutatea maximă a utilizatorului	[kg]	25	40	60	80	95
	Greutate și dimensiuni	UM	1	2	3	4	5
	lățime	[cm]	59	60	63	66	74
	lungime	[cm]	73	84	84	91	98
	înălțime	[cm]	54	79	90	96	112
	greutate	[kg]	13,5	16,5	18	20,5	23

Atenție: Intervalul de toleranță la măsurare este de +/- 1 cm / 1/2 in.

Atenție: Valori aproximative, în funcție de configurația produsului.

* Măsurat fără ham pelvian.

** Valoarea nu poate fi factorul principal pentru selectarea mărimii produsului.

5. Cum se assemblează produsul

INFORMAȚII!

Înainte de a începe asamblarea produsului, asigurați-vă că suprafața pe care este montat produsul este plană și nu prezintă riscul ca suportul să se răstoarne în timpul asamblării.

Se recomandă activarea frânelor după îndepărtarea bazei.

ATAȘAREA COLOANELOR LA BAZA CADRULUI

Coloanele trebuie așezate pe bază în locurile orificiului și înșurubate folosind șuruburile prevăzute cu coloanele. Această etapă nu se aplică dimensiunii 1 a cadrului, unde coloanele sunt atașate permanent la bază.

INSTALAREA SUPORTULUI PELVIAN

Introduceți suporturile clemei de șold în primul cadru al bazei. După plasarea clemei și reglarea acesteia la înălțimea dorită, strângeți bine butoanele.

ATAȘAREA COLOANELOR LA BAZA CADRULUI



INSTALAREA SPRIJINULUI PELVIC



INFORMAȚII

INSTALAREA SUPORTULUI TORACIC

Glisați suporturile pentru hamul toracic în cadrul secundar al bazei. După montarea hamului și reglarea acestuia la înălțimea dorită, este necesar să strângeți bine piulițele.

INSTALAREA SUPORTULUI TORACIC



ATENȚIE!

Înainte de a utiliza produsul, este esențial să verificați corectitudinea asamblării acestuia.

Asigurați-vă că șuruburile care fixează coloanele cadrului sunt strânse în mod corespunzător și că butoanele sunt bine fixate.

În plus, verificați dacă clemele șoldului și pieptului nu se schimbă sub presiune.

6. Cum se utilizează produsul

ATENȚIE!

Reglarea inițială a cadrului la utilizator ar trebui efectuată numai de către personal instruit în mod corespunzător, iar ajustările ulterioare ar trebui efectuate de către persoane instruite. Ajustarea corectă a produsului este esențială pentru siguranță și asigură derularea corectă a reabilitării utilizatorului.

Înainte de a utiliza cadrul, asigurați-vă că blocați frânele roții. Roțile neblocați pot determina deplasarea produsului în timpul plasării utilizatorului, ceea ce poate duce la o cădere și la răni.

Înainte de a pune utilizatorul în cadrul, suporturile trebuie deschise pentru a asigura accesul ușor la produs. Este important să nu se odihnească greutatea corporală pe protecțiile de prindere deschise. Acestea nu sunt destinate să asiste în timpul intrării sau ieșirii din cadrul. Supraîncărcarea acestora poate provoca deformarea pieselor, funcționarea defectuoasă a dispozitivului de blocare și pierderea stabilității produsului, ceea ce poate duce la răni.

Odată ce utilizatorul este complet în poziție verticală, închideți clemele, asigurându-vă că acestea sunt blocate în siguranță.

6.1 Suport pentru piept

INFORMAȚII!

Reglarea suportului pentru piept se face prin slăbirea butoanelor de pe coloanele cadrului setarea înălțimii dorite a suportului, strângerea fermă a butoanelor și asigurarea strângerii corecte a acestora.

Trebuie acordată atenție pentru a evita depășirea liniilor duble de pe suporturile de prindere.



ATENȚIE!

Înălțimea suportului toracic depinde de controlul utilizatorului asupra pieptului. Dacă controlul este bun, utilizatorul poate menține o poziție verticală a trunchiului fără un efort semnificativ, simțindu-se sigur și confortabil - atunci suportul poate fi poziționat ușor mai jos.

Cu toate acestea, procesul de mers pe jos ar trebui să înceapă cu suportul plasat sub axile, urmat de coborârea treptată, după cum este necesar.

6.2 Sprijin pentru regiunea pelviană

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SUPORTULUI PELVIAN



INFORMAȚII!

Reglarea suportului șoldului se face prin slăbirea butoanelor de pe coloanele cadrului, setarea înălțimii dorite a suportului, strângerea fermă a butoanelor și asigurarea strângerii corecte a acestora.

Trebuie acordată atenție pentru a evita depășirea liniilor duble de pe suporturile de prindere.

AJUSTAREA ADÂNCIMII SUPORTULUI PELVIAN



INFORMAȚII!

Pentru a regla adâncimea suportului, slăbiți și îndepărtați butoanele situate sub suport, setați poziția dorită (astfel încât găurile de pe cadre să se alinieze) și apoi înșurubați butoanele înapoi, asigurându-vă că acestea sunt strânse corect și sigur.





INFORMAȚII!

Pentru a regla adâncimea suportului, slăbiți și îndepărtați butoanele situate sub suport, setați poziția dorită (astfel încât găurile de pe cadre să se alinieze) și apoi înșurubați butoanele înapoi, asigurându-vă că acestea sunt strânse corect și sigur.



ATENȚIE!

Suportul pelvian trebuie poziționat la nivelul troanțelor mari ale membrelor inferioare.

După reglarea înălțimii hamului pelvian, trebuie ajustat gradul de deplasare înainte – înapoi față de șolduri. Precizia acestei ajustări determină poziția corectă a trunchiului și a bazinului.

6.3 Hamul pelvian

INFORMAȚII!

Hamul pelvian protejează utilizatorul împotriva căderii.

Este fixat folosind cataramă pe suportul pelvian.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că cataramele nu se desprind sub forța aplicată hamului.



ATENȚIE!

Hamul pelvian nu trebuie tratat ca un scaun. Acesta este conceput exclusiv ca o măsură de siguranță pentru a preveni căderea utilizatorului.

INFORMAȚII

Poziția verticală este atât sigură, cât și confortabilă. În această poziție, utilizatorul se adaptează la postura verticală, simțul echilibrului se ajustează, iar organele interne și sistemul circulator se adaptează la noile condiții și la sarcina crescută.

În această poziție, utilizatorul poate rămâne atâta timp cât este necesar în timp ce efectuează exerciții, sarcini mici etc.

Produsul rămâne stabil chiar și în cazul leșinului utilizatorului.

6.4 Roți cu frână de fricțiune

INFORMAȚII

Utilizarea roților din spate cu o frână de rezistență permite reglarea vitezei de mișcare a utilizatorului în cadrul.

Acest lucru este deosebit de important atunci când începeți să învățați să mergeți în cadrul.

Butonul este utilizat pentru a regla presiunea aplicată plăcuței de frână, ceea ce încetinește rotația roții.

Atunci când se fac primii pași în ACTIVALL™, se recomandă utilizarea frânei de rezistență pentru a face dispozitivul să se miște mai încet. Odată ce utilizatorul câștigă încredere, rezistența la frânare poate fi redusă.



STRÂNGEREA BUTONULUI

Crește presiunea plăcuței de frână asupra roții

Reduce viteza de deplasare a cadrului



SLĂBIREA BUTONULUI

Reduce presiunea plăcuței de frână asupra roții

Crește viteza de deplasare a cadrului



7. Învăț să mergi

Procesul de învățare a mersului într-un cadru dinamic este un proces de reabilitare treptată. Cadrul dinamic este un dispozitiv care susține postura corectă și permite o abordare pas cu pas a mersului pe jos.

Pregătirea utilizatorului pentru procesul de mers pe jos

Un medic sau un fizioterapeut evaluează starea fizică și neurologică a utilizatorului pentru a adapta dispozitivul la nevoile sale, luând în considerare postura, gama de mișcări comune și forța musculară.

Dispozitivul este apoi ajustat în funcție de parametrii individuali ai utilizatorului, cum ar fi înălțimea, greutatea și nevoia de sprijin în diferite părți ale corpului.

Poziționați utilizatorul

Faza inițială implică învățarea pentru a menține o poziție în picioare în cadru. Utilizatorul, susținut de îngrijitori, se obișnuiește cu noua poziție în timp ce lucrează simultan la echilibru și la stabilizarea completă a corpului. Timpul petrecut în picioare în cadru este extins treptat în funcție de capacitățile utilizatorului.

Activarea mușchilor picioarelor

Odată ce utilizatorul este capabil să mențină o poziție verticală pentru o perioadă lungă de timp, se introduc exerciții pentru activarea mușchilor picioarelor. Treptat, sunt introduse exerciții mai avansate pentru a pregăti utilizatorul pentru încercarea de a lua măsuri.

Pregătirea pentru mersul pe jos

Utilizatorul, susținut treptat de dispozitiv, începe să facă primii pași. O parte crucială a terapiei este practicarea echilibrului și coordonării în timpul încercărilor de mers pe jos, învățarea ritmului de mers pe jos și sincronizarea mișcărilor membrelor inferioare cu restul corpului.

Cadrul dinamic ajută la menținerea echilibrului și oferă amortizare în caz de slăbiciune sau leșin în timpul mersului pe jos. În această etapă, pe măsură ce utilizatorul ia măsuri și câștigă controlul asupra corpului său, atât distanța acoperită, cât și durata exercițiilor cresc treptat.

Este important ca procesul de învățare pe jos să fie adaptat la nevoile și abilitățile individuale ale utilizatorului.

După finalizarea exercițiilor cu cadrul utilizatorului, cu ajutorul unui îngrijitor, ar trebui să se întoarcă în siguranță într-un scaun cu roțile, scaun sau pat.

ATENȚIE!

Utilizatorul nu trebuie să părăsească niciodată cadrul în mod independent. Îngrijitorul este responsabil pentru sprijinirea utilizatorului din lateral sau din spate.

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită blocării roților scaunului cu roțile sau stabilizării scaunului sau a altor echipamente înainte de a-l deplasa înapoi în timpul transferului utilizatorului. Mișcarea din spate a scaunului ar putea duce la căderea utilizatorului, ducând la rănire.

Este interzisă deplasarea utilizatorului în cadru pe suprafețe înclinate, neuniforme sau pe zone cu obstacole (de exemplu, borduri, trepte), deoarece acest lucru ar putea deteriora dispozitivul.

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza cadrul dinamic pentru stat în picioare ACTIVALL™, citiți acest manual de utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, pregătiți utilizatorul și dispozitivul!

8.1 Pregătirea utilizatorului

Înainte de utilizarea produsului, este esențial să vă asigurați că:

- Îmbrăcămintea utilizatorului este ușoară și confortabilă; se recomandă haine sport confortabile.
- Încălțăminte trebuie să fie confortabilă și, în plus, să ofere stabilitate gleznei.
- Din motive igienice și pentru a evita abraziunea, este recomandat ca utilizatorul să poarte întotdeauna haine în timpul utilizării dispozitivului; pielea nu trebuie să fie goală, mai ales în zonele care intră în contact frecvent cu tapițeria.
- Drenuri, punji, catetere etc., dacă sunt utilizate, trebuie fixate corespunzător pentru a funcționa corect și pentru a nu deranja în timpul utilizării produsului.
- Dacă este necesar, utilizatorul poate purta dispozitive ortopedice (guler, corset, orteză, încălțăminte ortopedică), doar dacă sunt recomandate de medic.

Atenție!

Îmbrăcămintea ar trebui să protejeze pielea utilizatorului de contactul direct cu tapițeria, precum și cu alte părți ale echipamentului.

Numai medicul poate lua o decizie cu privire la utilizarea oricărui tip de aprovizionare ortopedică!

8.2 Pregătirea produsului

Înainte de utilizare, este necesar să:

- asambla cadrul în picioare,
- așezați cadrul în picioare pe o suprafață plană și stabilă, departe de surse de foc și temperaturi ridicate;
- asigurați-vă că toate elementele sunt nedeteriorate, montate în mod corespunzător și stabile,
- acționați frânele,
- reglați cadrul în picioare la dimensiunea utilizatorului și nevoile sale,
- montați accesoriile (dacă este cazul);
- plasați utilizatorul în cadrul în picioare,
- fixați elementele care stabilizează utilizatorul;
- Începeți să vă ridicați.

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza cadrul, asigurați-vă că acesta a fost asamblat corect și că butoanele, șuruburile și alte elemente de fixare sunt strânse în mod corespunzător. Verificați orice slăbire a elementelor de fixare sub sarcină aplicată.

Înainte de a utiliza cadrul, verificați dacă toate curelele și dispozitivele de siguranță au fost reglate și fixate corespunzător.

Cadrul va funcționa corect numai dacă este adaptat la dimensiunile și nevoile utilizatorului. Regula principală la reglarea cadrului este de a oferi utilizatorului siguranță maximă. Nu forțați nicio schimbare a poziției corpului, deoarece acest lucru poate provoca disconfort. Utilizarea necorespunzătoare a cadrului poate duce la consolidarea modelelor de postură incorecte.

Reglarea inițială a cadrului la utilizator ar trebui efectuată numai de personal instruit în mod corespunzător și continuată de persoane instruite. Montarea corectă a dispozitivului este esențială pentru siguranță și asigură cursul corect al reabilitării utilizatorului.

8.3 Poziția verticală

Durata de timp pentru procesul de poziție verticală este diferită pentru fiecare utilizator. Se recomandă prelungirea acestei perioade în timpul perioadei inițiale (perioada de adaptare pentru schimbarea poziției).

Atât medicul, cât și fizioterapeutul pot lua decizii cu privire la durata procesului de poziție verticală. Procesul de poziție verticală trebuie să fie întotdeauna efectuat sub supravegherea unei persoane instruite!

Se recomandă să distrați atenția utilizatorului în timpul procesului de poziție verticală prin: jocuri de manipulare, jocuri educative, stimulare tactilă și altele.

ATENȚIE!

Este foarte important să ajustați dispozitivul la utilizator înainte de a-l utiliza!

Înainte de a începe procesul de stat în picioare, asigurați-vă că toate suporturile și hamul pelvian au fost reglate și fixate în mod corespunzător și că elementele de fixare ale elementelor reglabile sunt strânse în siguranță.

Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat!

Numai personalul instruit poate ajusta cadrul în picioare la utilizator!

În ceea ce privește prima poziție verticală, aceasta are loc în secțiile de reabilitare, neurochirurgie sau ortopedie. În plus, aceasta trebuie efectuată împreună cu medicul și fizioterapeutul, deoarece pot apărea probleme medicale în timpul primelor tratamente, cum ar fi leșinul, scăderea tensiunii arteriale, amețeli etc. Stând în picioare în casă, împreună cu personalul instruit (tehnician de reabilitare, asistentă medicală districtuală, membri ai familiei instruiți).

9. Norme de siguranță

ATENȚIE!

Cadrul dinamic pentru stat în picioare ACTIVALL™ trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, pregătiți utilizatorul și dispozitivul!

Este foarte important să consultați medicul sau fizioterapeutul pentru a lua o decizie corectă cu privire la alegerea ACTIVALL™ și dimensiunea acestuia. De asemenea, este esențial să vă familiarizați cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

1. Înainte de utilizare, este necesar să:

- să se asigure că nu există daune sau defecte diferite care ar putea pune în pericol viața utilizatorului;
- verificați dacă toate piesele sunt de lucru și sunt montate corect și, în plus, verifica dacă acestea nu sunt rupte,
- verificați dacă toate șuruburile, butoanele și toate părțile lipite, cusute sau filetate sunt strânse;
- verificați starea tapițeriei pentru orice semne de deteriorare,
- verificați dacă frânele funcționează corect;
- verificați dacă cataramele funcționează corect,
- reglați dispozitivul în funcție de măsurătorile și nevoile utilizatorului, de exemplu, reglarea suporturilor, a hamurilor și a accesoriilor (dacă există),
- asigurați-vă că toate piesele mobile și butoanele pentru reglaje sunt stabile și blocate;
- fixați utilizatorul cu ajutorul dispozitivelor de stabilizare disponibile ale cadrului în picioare. Este foarte important să se asigure pacientul, deoarece îl protejează de cădere.

2. Este interzisă utilizarea cadrului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

3. Este interzisă utilizarea cadrului dacă acesta este deteriorat sau dacă lipsește vreun element.

4. Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat. Dispozitivul trebuie folosit numai în prezența unei persoane instruite și competente.

5. Este interzisă urcarea sau coborârea scărilor, indiferent dacă utilizatorul se află în dispozitiv sau nu. Este interzis să lăsați utilizatorul și dispozitivul pe un teren instabil, chiar dacă frâna este acționată.

6. Este important să acționați frâna în timpul urcării și coborârii utilizatorului în/din cadru.

7. Asigurați-vă că toate membrele nu se află aproape de spițele roților sau alte elemente reglabile.

8. Cadrul trebuie depozitat și utilizat departe de surse de foc sau temperaturi ridicate. De asemenea, nu trebuie depozitat în încăperi cu umiditate ridicată.

9. Asigurați cadrul în timpul transportului pentru a evita orice deteriorare posibilă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele apărute din cauza pregătirii

necorespunzătoare a dispozitivului în timpul transportului.

10. Înainte de utilizarea cadrului, îndepărtați toate ambalajele de hârtie și plastic. Ambalajul nu este jucărie! Păstrați-l departe de copii și animale. Înainte de a utiliza cadrul în picioare, îndepărtați toate ambalajele din hârtie și plastic. Ambalajul nu este o jucărie! Stai departe de copii și animale.

ATENȚIE!

Ajustarea incorectă a produsului poate duce la efecte secundare cum ar fi leșinul, deformările corporale, supraîncărcarea articulațiilor etc. Dacă apar simptomele menționate mai sus, opriți imediat utilizarea produsului, scoateți utilizatorul din produs și așezați-le. Dacă simptomele nedorite persistă, contactați imediat un medic. Dacă simptomele au dispărut, informați medicul curant despre acest fapt pentru a lua o decizie cu privire la procesul de reabilitare ulterioară.

Incidentele grave care implică acest dispozitiv trebuie raportate atât producătorului, cât și autorității competente din țara dumneavoastră.

Dispozitivul conține părți mici pe care copiii le pot înghiți.

Nu utilizați un produs care prezintă semne de deteriorare, distrugere sau uzură. Numai un produs complet funcțional, utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, este sigur pentru utilizator. Dacă produsul este deteriorat, întrerupeți utilizarea și contactați-ne cu producătorul.

Este interzisă efectuarea oricăror modificări privind structura dispozitivului datorită faptului că acesta este periculos și duce la pierderea garanției.

Greutatea utilizatorului nu trebuie să fie mai mare decât greutatea maximă descrisă la pagina 8, unde veți găsi informații cu privire la această problemă.

10. Condiții de garanție

1. Akces-MED Ltd. vinde produse fără defecte de fabricație sau defecte.
2. Producătorul oferă cumpărătorului o garanție de 24 de luni de la data achiziționării. Toate defectele descoperite în timpul perioadei de garanție vor fi reparate gratuit.
3. Toate defectele care apar după perioada de garanție pot fi reparate numai atunci când utilizatorul va plăti pentru aceasta.
4. Cadrul este acoperit de o garanție de 36 de luni pe teritoriul Canadei – detaliile drepturilor care decurg din garanția extinsă sunt reglementate de cartea de garanție.
5. Producătorul susține că produsul poate fi utilizat timp de 48 de luni. Utilizatorul poate utiliza acest produs după această perioadă numai atunci când va trimite dispozitivul producătorului pentru a-l întreține. Apoi, producătorul determină din nou cât timp poate fi utilizat produsul și, în plus, va fi determinată data următorului serviciu.
6. Dacă produsul este deteriorat, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau serviciul pentru clienți Akces-MED Ltd.: (nr. +48 17 864 04 77, e-mail: export@akces-med.com).

11. Întreținere și curățare

Cadrul vertical dinamic ACTIVALL™, care este un dispozitiv medical, trebuie păstrat întotdeauna curat și trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Cadrul pentru stat în picioare trebuie păstrat într-o cameră curată, uscată și ventilată. Întreținerea și curățarea trebuie efectuate cel puțin o dată pe lună. Curățarea și întreținerea periodică a dispozitivului este esențială pentru a menține buna funcționare și siguranța acestuia.

Recomandări pentru curățarea tapițeriei și a altor elemente ale dispozitivului:

- spălați cu apă caldă folosind o cârpă moale și agenți de curățare ușoară,
- asigurați-vă că cârpa nu este prea umedă, deoarece acest lucru poate mări pata și poate deteriora tapițeria sau spuma din interiorul tapițeriei;
- amintiți-vă să eliminați excesul de umiditate din tapițerie înainte de următoarea curățare,
- tapițeria nu trebuie să se ude în timpul curățării,
- nu trebuie să înmuiați tapițeria,
- după curățarea petelor, tapițeria trebuie clătită cu apă caldută și uscată cu o cârpă curată,
- nu utilizați perii dure pentru curățarea tapițeriei,
- nu curăța cadrul și tapițeria cu substanțe chimice puternice, de exemplu solvenți sau caustice pe bază de clor;
- nu curățați, nu înlocuiți niciun element și nu mențineți cadrul în picioare în timpul utilizării;
- elementele metalice și plastice trebuie curățate manual cu agenți de curățare adecvați, după ce ați citit recomandările producătorului agentului de curățare dat,

- este posibil să se dezinfecteze elementele de metal, plastic, lemn și tapițerie ale produsului cu un dezinfectant disponibil în general. Pentru a dezinfecta elementul selectat, pulverizați suprafața acestuia cu un dezinfectant disponibil în general pe piață și ștergeți cu o cârpă uscată și curată. După dezinfecție, așteptați până când elementul este complet uscat, în special în cazul tapițeriei. Înainte de a utiliza dezinfectantul, verificați mai întâi într-un loc invizibil dacă produsul nu va decolora sau deteriora suprafața dezinfectată.

Înainte de utilizare, este necesar să:

- să se curețe roțile,
- să se verifice dacă roțile sunt montate corect, să se verifice dacă frâna oprește roata de întoarcere;
- se verifică dacă structura cadrului în picioare nu prezintă rupturi sau alte tipuri de deformări;
- se verifică dacă toate piesele mobile funcționează și dacă toate șuruburile, piulițele, butoanele etc. sunt strânse corect;
- se verifică dacă centurile nu sunt rupte; verificați dacă cataramele și clemele funcționează corect.

ATENȚIE!

Amintiți-vă că toate elementele și tapițeria trebuie să fie întotdeauna uscate înainte de utilizare.

Producătorul cadrului dinamic în picioare, Akces-MED Ltd., nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea detergenților nepotriviti.

Producătorul își asumă responsabilitatea numai pentru defecțiunile sau daunele ascunse care au apărut în ciuda faptului că utilizatorul a respectat liniile directoare.

În caz de daune, este esențial să contactați persoana care v-a vândut produsul.



11. Întreținere și curățare

INSPECȚIA TEHNICĂ

Inspecțiile tehnice ar trebui efectuate în mod regulat. Înainte de întreținere, produsul trebuie curățat temeinic pentru a dezvălui orice deteriorare ascunsă.

Frecvență	Ce ar trebui verificat?	Ce ar trebui făcut	RĂSPUNSURI
-----------	-------------------------	--------------------	------------

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

Starea generală a produsului.

Verificați:

- întregul produs pentru orice deteriorare vizibilă, fisuri sau defecte mecanice,
- dacă produsul este complet,
- dacă toate șuruburile, butoanele, piulițele și alte elemente ale construcției sunt complete și strânse.

Roți și frâne.

Verificați:

- dacă roțile sunt montate corespunzător și dacă nu sunt deteriorate,
- dacă frâna blochează roata care se rotește,
- dacă roțile nu sunt murdare. Dacă este necesar, curățați roțile.

Fixarea elementelor de construcție.

Verificați toate mecanismele produsului și piesele sale în mișcare. Verificați în special:

- dacă produsul este montat corespunzător,
- dacă roțile sunt montate corespunzător,
- dacă elementele care fixează utilizatorul sunt montate corespunzător și dacă funcționează bine,
- dacă toate părțile mobile sunt complete,
- dacă toate piesele mobile funcționează corect, nu blocați;
- dacă mecanismele de ajustare ale următoarelor elemente funcționează în mod corespunzător (dacă este cazul).

Elemente de tapițerie.

Verificați:

- dacă există deteriorări, rupturi, cusături libere sau deformări ale elementelor de tapițerie,
- dacă hamurile și curelele pelviene nu sunt rupte sau răsucite și dacă cataramele funcționează corect,
- dacă hamul pelvian nu se desface sub presiune sau când este tras.

În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.

O dată pe săptămână

Curățarea produselor.

Dacă cadrul și tapițeria se murdăresc (praf, noroi etc.) în timpul utilizării de zi cu zi, ștergeți-le cu o cârpă umedă fără detergenți. Îndepărtați murdăria (de exemplu, părul, resturile alimentare etc.) din părțile mobile ale produsului.

Produsul trebuie curățat atunci când este necesar, dar cel puțin o dată pe săptămână. Nu utilizați detergenți pe bază de clor sau alcool metilic.

Înainte de a utiliza produsul, verificați dacă tapițeria este uscată.

O dată pe lună

Osiile roților, conectorii rapizi (dacă este cazul).

Verificați:

- dacă roțile se rostogolesc și dacă nu sunt slăbite. Pentru a menține roțile, aplicați o cantitate mică de conservant-lubrifiant între ax și butucul roții. Verificați dacă puteți îndepărta și atașa cu ușurință roțile. Curățați roțile atunci când sunt murdare.

Conectorii pentru construcția produselor (sudură, filetare, lipire).

Verificați:

- starea cadrului produsului în locurile de îmbinare (suduri, fire, lipire).
- Anvelope/innertubes (dacă este cazul).

Verificați:

- Starea de uzură a anvelopei. Verificați dacă există deteriorări vizibile. Verificați presiunea în pneuri (dacă este cazul). Dacă presiunea în anvelope este prea mică, umflați-le la nivelul corect.

În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.

O dată la 6 luni

Construcția pieselor mobile.

Verificați:

- dacă părțile mobile ale construcției nu au fost deteriorate. Mențineți-le folosind un agent de curățare adecvat.

Etichetarea produsului.

Verificați:

- dacă marcajul și etichetele sunt lizibile.

În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.

DUPĂ VIAȚA FINANȚĂRII PRODUSULUI

Verificarea detaliată a produsului.

Producătorul specifică durata de viață a produsului, care este dată în manualul de utilizare. După perioada dată, utilizatorul poate utiliza produsul numai dacă acesta este trimis înapoi producătorului pentru a fi verificat mai întâi. După aceea, producătorul va redefini durata de viață a produsului și data următoarei verificări.

12. Etichetare

	Declarație că produsul îndeplinește cerințele esențiale		Uscați vertical
	Nr. serie		Nu folosiți clor
	Vă rugăm, citiți manualul de utilizare înainte de utilizare		Nu călcați
	Atenție		Nu folosiți curățare chimică
	Producător		Nu folosiți înălbitor
	Data de fabricație		Conținut delicat, fragil
	Produsul nu conține latex		Este interzis atât să urci, cât și să cobori scările. Nu contează dacă utilizatorul este plasat în dispozitiv sau nu
	A se depozita în loc uscat		Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat în timpul utilizării produsului.
	A se proteja de lumina soarelui		Este interzisă utilizarea fără centurile de siguranță fixate
	A se depozita în intervalul de temperatură		Trebuie să citiți informațiile suplimentare
	Produs medical		Trebuie să citiți informațiile suplimentare
	Identificatorul unic al dispozitivului		Trebuie să folosiți instrumentele din kit-ul de montare

Plăcuța cu date despre produs conține informații de bază despre produs, cum ar fi numele, sarcina maximă, datele producătorului, data fabricației și marcarea în conformitate cu cerințele pentru dispozitivele medicale.

Producător



Akces-MED Ltd.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 7
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619